



Notice  
d'utilisation  
&  
conditions de garantie

*Line 5*

PARIS

La lumière, source de beauté  
et de bien-être

[www.line5paris.com](http://www.line5paris.com)

## MASQUE COSMOS

Le masque Cosmos est conçu pour émettre une lumière rouge sur l'ensemble du visage et sur des zones choisies du corps, afin de **stimuler les cellules de votre peau** et de **lutter contre les effets du vieillissement**. L'utilisation du masque Cosmos permet de **raffermir, restructurer** et de **tonifier** la peau du visage et/ou du corps. Il agit sur le **vieillessement cutané, l'hygiène de la peau**, les **vergetures** rouges et blanches, le **relâchement cutané, la peau d'orange**.

## CONTENU

### LE COFFRET CONTIENT :

- Un masque
- Un socle et son mât
- Des lunettes de protection
- Une clé Allen permettant d'ajuster la hauteur du masque
- Une notice d'utilisation

## UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

### MISE EN ROUTE :

- Brancher le masque Cosmos sur une prise secteur.
- Lancer le programme de 12 min par un appui rapide sur le bouton de lancement, situé en haut du mât (le programme peut mettre quelques secondes pour se lancer).
- Le programme peut être interrompu à tout instant par un simple appui sur le bouton.
- Une fois éteint, attendre quelques secondes avant de relancer un programme.

### PROTOCOLE D'UTILISATION :

- Le masque Cosmos réalise un scénario de 12 min alternant flash et lumière continue.
- Mettre les lunettes de protection fournies et spécialement conçues pour protéger les yeux de la lumière rouge.
- L'utilisation de l'appareil convient à toutes les couleurs de peau.
- Après 3 utilisations consécutives, laisser refroidir l'appareil pendant 5 min avant la prochaine mise en route.



Cosmos  
Masque

Réf. : HPC0093


## SPÉCIFICATIONS

### LE MASQUE

- Masque en acier de 2mm d'épaisseur.
- Protection de l'utilisateur grâce à une vitre en PSPE.

### LE SUPPORT (SUR TABLE)

- Socle en acier.
- Mât en acier : hauteur 500mm.
- Bras articulé afin d'orienter le masque dans la meilleure position.

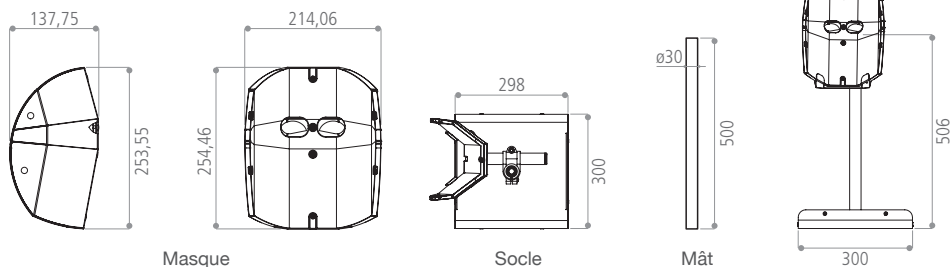

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Type	Masque Cosmos anti-vieillessement
Température de fonctionnement	0°C à +35°C
Durée de vie maximale	50 000H
Matériaux	Masque : Vitre thermoformée en PSPE, plaque d'acier, clips plastiques Socle et mât : acier
Poids	7 Kg
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 50-60Hz

### MAINTENANCE

Il est recommandé de ranger le dispositif dans un endroit approprié après utilisation.  
La durée de vie des LED est de l'ordre de 50 000 heures.  
Aucun réglage n'est à prévoir.

### ENTRETIEN - RECYCLAGE

Recycler le dispositif selon la réglementation des composants électroniques et électriques en vigueur.  
**Ne pas nettoyer directement au robinet. Utiliser un chiffon humide, éviter toute exposition à l'eau.**

### CONTRE-INDICATIONS

L'utilisation de cet appareil n'est pas appropriée aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes souffrant d'épilepsie. Ne pas utiliser les LED avec des médicaments anti-inflammatoires, avec des produits photosensibilisants y compris les photosensibilisants naturels comme le millepertuis. Ne pas utiliser sur des lésions cancéreuses, sur des grains de beauté atypiques, sur les aréoles des seins, les muqueuses buccales ou génitales. **Ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin.** Tenir à l'écart d'un pacemaker.

## GARANTIE

La Société garantit la conformité des Produits Line 5 aux spécifications de la Société et à l'état des normes techniques françaises et européennes applicables au jour de l'achat.

Tous les Produits en vente bénéficient de la garantie légale de conformité (articles L.211-4 à L.211-16 du Code de la Consommation) et de la garantie contre les vices cachés (articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil), permettant au Client de renvoyer les Produits livrés défectueux ou non conformes.

Tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de conception, de matière ou de fabrication donne droit à l'échange et/ou la réparation du Produit, après examen du Produit reconnu défectueux par la Société. Cette garantie ne s'applique qu'au bénéfice direct du Client.

La garantie ne couvre pas les défauts qui proviendraient du non-respect des prescriptions d'utilisation ou d'entretien indiquées par la Société et qui figurent dans la notice. De même, la garantie ne couvre pas les défauts qui proviendraient d'une négligence, d'une cause étrangère au Produit telle qu'une mauvaise installation électrique ou une installation vétuste, un défaut d'entretien, un défaut de surveillance, des fluctuations de courant électrique, une surtension, un accident, la foudre, un incendie, un dégât des eaux, des pénétrations de sable ou de liquide, un rangement inapproprié, une utilisation anormale, une utilisation en milieu humide ou extérieur si les indications, la fiche technique ou la notice d'utilisation ne l'autorisent pas expressément.

De même, la garantie ne s'applique pas en cas de défaut provoqué par l'usure normale résultant des caractéristiques physiques inhérentes au Produit, pour lequel, les performances sont, par principe, fonction du temps et de l'intensité d'utilisation, ou de l'utilisation conforme aux préconisations d'usage du Produit.

La garantie ne s'applique pas non plus en cas de chocs, en cas d'usage de pièces ou accessoires non fabriqués par la Société, en cas d'altération ou de retrait du numéro du lot apposé en usine, en cas d'assemblage, de désassemblage, d'intervention ou modification effectués par un tiers non agréé par la Société.

Pour bénéficier de la garantie, le Client devra tout d'abord aviser la Société à l'adresse [contact@line5paris.com](mailto:contact@line5paris.com) ou par courrier à l'adresse du Service retour produit : Line 5 - service SAV - L'intendant ouest 4 les portes de Romagne 33760 Romagne, des défauts imputés au Produit dès la manifestation de ceux-ci, et, au plus tard, dans un délai d'un mois, en fournissant un descriptif détaillé du ou des défauts imputés et la preuve de ceux-ci, le numéro de lot du Produit et les conditions d'emploi de celui-ci.

Après accord écrit de la Société, le Client devra expédier dans les quinze jours, à l'adresse du Service retour produit le

Produit complet, dans son emballage d'origine, et s'abstenir d'effectuer lui-même ou de faire effectuer une réparation par un tiers. Un retour non autorisé pourra être refusé par la Société. Les frais de retour sont à la charge du Client.

En cas de défaut reconnu par la Société au titre de la présente garantie, la Société procédera, à son choix, au remplacement du ou des Produits reconnus défectueux ou à l'échange du matériel ou des pièces reconnus défectueux, et ce par des Produits aux performances au moins équivalentes et pouvant présenter des différences de conception et/ou de présentation. Toute autre responsabilité ou compensation est exclue. En cas de remplacement de Produits au titre de la présente garantie, les Produits remplacés sont eux-mêmes garantis mais uniquement pour la durée restant à courir de la garantie initiale.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue pour responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits, ou consécutifs (manque à gagner y compris) occasionnés du fait d'une utilisation du produit non conforme à la présente notice ou à des fins autres que celles pour lesquelles le produit a été conçu. En cas d'état défectueux, tous les accessoires, y compris la prise secteur, n'étant pas couvert par la garantie, doivent être retournés dans les 15 jours à compter de la date d'achat, pour remplacement. L'original de la facture ainsi qu'une description précise de la panne sont indispensables pour chaque cas de réparation. Cosmos Masque est garanti 24 mois.

Vous souhaitez nous contacter ?

Ecrivez-nous à cette adresse :

**[contact@line5paris.com](mailto:contact@line5paris.com)**

